

**Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης**

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας έχουν ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώσετε με τις οδηγίες αυτές ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα και οι ζημιές στο μηχανήμα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχανήμα ή άλλα αντικείμενα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Αυτό αναφέρεται σε σημαντικές συμβουλές και πληροφορίες.

**Οδηγίες ασφαλείας**

Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Αν δώσετε αυτή την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλούμε δώστε επίσης και τις οδηγίες χρήσης.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για ιδιωτική χρήση και μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία.

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, για τον καθαρισμό ή σε περίπτωση βλάβης.

• Μην λειτουργείτε ένα χαλασμένο εξάρτημα.

• Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

• Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με τη συσκευή.

• Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) μακριά από αυτά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τις σακούλες γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

**Μεταχείριση των μπαταριών****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέων και χρησιμοποιημένων μπαταριών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.


**Θέση χειριστηρίων**

1 Προστατευτικό κάλυμμα

2 Κύλινδρος

3 Κουμπί

4 Θήκη μπαταριών

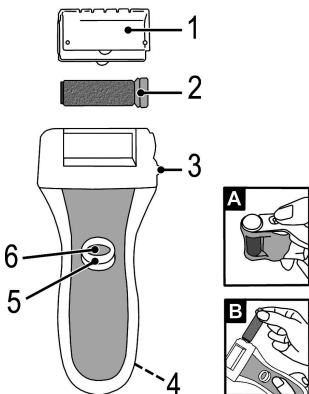

5 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

6 Κλείδωμα

**Τοποθέτηση των μπαταριών**

**(Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα)**

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στη λαβή στρώνοντας το κάλυμμα προς τα κάτω.

2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AA/R6. Βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα (βλέπε κάτω μέρος της θήκης της μπαταρίας)!

3. Κλείστε ξανά τη θήκη μπαταριών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφευχθεί η «διαρροή».

**Συμβουλές για τη χρήση****Πώς δουλεύει η συσκευή αφαίρεσης κάλων;**

Η ειδική επίστρωση αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος δουλεύει γρήγορα τις πληγείσες περιοχές. Δεδομένου ότι ο κύλινδρος επιβραδύνεται όταν η πίεση αυξάνεται, προστατεύετε από τον τραυματισμό. Δεν χρειάζεται εμπειρία για την φροντίδα των ποδιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να γίνει πιο αποτελεσματική θεραπεία**

• Πάντα να εφαρμόζετε το ρολό απαλά.

• Μπορείτε να εφαρμόζετε ξανά και ξανά σε επιμέρους τομείς.

• Εφαρμόστε το ρολό στις πληγείσες περιοχές από διαφορετικές κατευθύνσεις.

**Πότε θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή;**

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άσχημα σκασμένο δέρμα ή ανοιχτές πληγές!

• Μην το χρησιμοποιείτε σε εκ γενετής σημάδια ή κρεατοελιές.

• Εάν πάσχετε από ασθένειες όπως ο διαβήτης, η αιμοφιλία ή ανοσοποιητική ανεπάρκεια, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.

## Πρέπει να κάνω προετοιμασία στα πόδια μου;

Όχι, ο κάλος είναι καλύτερα να αφαιρεθεί όταν στεγνώσει. Το νερό ή η κρέμα ενυδάτωσης επηρεάζει την εφαρμογή της θεραπείας. Εάν είναι απαραίτητο, πλύνετε γρήγορα τα πόδια σας και στεγνώστε καλά.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν ο κάλος είναι πολύ δύσκολος θα είναι πιο αποτελεσματικό να εφαρμόζετε καθημερινά από λίγο. Ως εκ τούτου, η χρήση της συσκευής να γίνεται απαλά κάθε ημέρα.
- Για να αποφύγετε το σκάσιμο του δέρματος, χρησιμοποιήστε μια κρέμα ενυδάτωσης μετά τη θεραπεία.
- Μετά από περίπου 7 έως 10 ημέρες θα πρέπει να επιτύχετε καλά αποτελέσματα. Κανονικά, 1-2 εφαρμογές την εβδομάδα θα πρέπει να αρκούν στη συνέχεια.

## Αλλάξτε τους κύλινδρους

Για λόγους υγιεινής, οι κύλινδροι είναι χρωματικά κωδικοποιημένοι για διαφορετικούς χρήστες.

1. Αν θέλετε να καθαρίσετε ή να αλλάξετε ένα ρολό, σύρετε το κουμπί 3 προς τα κάτω.
2. Ο κύλινδρος μπορεί τώρα να αφαιρεθεί εύκολα.
3. Το νέο ρολό ή το καθαρό ασφαλίξει στη θέση της συσκευής πιέζοντας απαλά.

## Διακόπτης On / Off

Χρησιμοποιήστε το κλειδίμα 6 για να αποτρέψετε τη συσκευή από το να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ξανά αν ο κύλινδρος έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Πιέστε το κλειδίμα για να σύρετε το διακόπτη στη θέση ON ή OFF.

## Καθαρισμός

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά.
  - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
  2. Μπορείτε να σκουπίσετε το περίβλημα της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

## Κύλινδρος

- Ο κύλινδρος μπορεί να αφαιρεθεί όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Βουρτίστε τον κύλινδρο και το περίβλημα καλά.
- Μπορείτε επίσης να ξεπλύνετε το ρολό με ζεστό νερό.
- Χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό σπρέι για υγιεινό καθαρισμό.



## Σημασία του συμβόλου "Κάδος απορριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας; μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.